

微量天平滤纸称量组件 微小颗粒的精确称量



满足精确滤纸称量的优化设计

坚固的不锈钢防风罩确保极短的稳定时间，同时避免热量传递。




自动化高速测量

马达驱动的防风罩可向左或向右任意自动开关，您更可以通过透明顶部玻璃防风罩关注滤纸的称量过程。



正确放置滤纸获取精确结果

创新设计的秤盘确保滤纸始终放置于固定理想位置。两种规格秤盘可供选择： $\varnothing 47$ & $\varnothing 70$ mm、 $\varnothing 110$ mm。

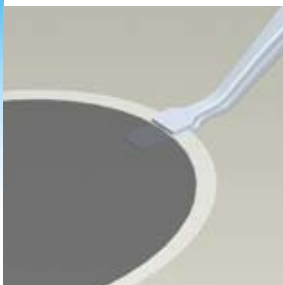

滤纸的牢固夹取

被测滤纸的一面吸附有特殊微粒（颗粒物PM）。使用标配的经过特殊设计的镊子可以始终牢固的夹取滤纸，避免滤纸抖动引起的微粒散落。



微量天平滤纸称量解决方案

梅特勒-托利多滤纸称量组件，实现滤纸的理想放置，大大缩短称量稳定时间，同时获得精确称量结果。凭借红外感应器(SmartSens)，即使在通风柜内也能方便操作，更可以向左或向右任意自动开关防风罩。放射状秤盘可确保滤纸始终放置于固定理想位置。配合卓越称量性能的XP2U/XP6超微量和微量天平，完全满足严格的法规要求。

- 简便的操作
- 提升称量性能
- 适合于不同尺寸的滤纸
- 满足法规一致性要求

梅特勒-托利多为微量滤纸称量设置了全新标准。

滤纸称量解决方案

XP超微量和微量天平



名称	滤纸称量组件	XP-W5防风罩(选件)	滤纸称量组件
滤纸尺寸	ø47&ø70mm		最大ø110mm
天平	XP2U / XP6	XP2U / XP6	XP2U / XP6 / XS3DU
订货号	11122136	11116043	00211227

XPE/XSE/XS分析天平



名称	滤纸称量组件	滤纸易巧称量件(ErgoClip)
滤纸尺寸	最大ø110mm	最大ø150mm
天平	XPE/XSE/XP分析天平	XPE/XSE/XP/XS分析天平
订货号	11140000	11140185

更多选件确保获得更好的称量性能



小型U形去静电装置

如果您的滤纸带有静电电荷, 去静电装置将是您的最佳选择, 它可以在称量前快速中和滤纸的静电电荷。

订货号: 11140161
(需同时订购11107766电源配合使用)



全面的数据管理

如果每天需要进行大量的滤纸称量, 并需要通过电脑PC进行数据管理, LabX软件将是您的最佳选择。



梅特勒-托利多

实验室 / 过程分析 / 产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业 / 商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

www.mt.com/filter

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加实验室微信号



微信号: MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
12310370 Printed in P.R. China 2016/03