

通用型 手套箱

提供台式玻璃钢或铝制手套箱，简单、气密性良好，可单独或同时控制氧气、湿度、温度。

可作为密闭手套箱或简单的干燥气体净化箱使用。如需更加严格精确的控制，可增加自动控制功能。



玻璃钢手套箱



铝手套箱



专利隔膜顶部，由耐用PVC乙烯膜制成。使刚性箱体可随双手放入或移出手套箱增大或收缩，补偿由此引起的体积变化，最大程度地减少气体外泄，使用方便、舒适。

所有COY手套箱满足洁净和耐用的严格标准。溶剂焊接保证气密性结构，不会泄露。门密封圈提供可靠的密封，而不影响在手套箱内部的操作。观察窗可视性良好，观察无障碍。手套可轻松更换。降压阀和手动注入球阀设计，可轻松注入需要的混合气体，进行氧气或湿度控制。

标配


- 袖长橡胶手套
- 手动球阀
- 专利隔膜顶部
- 可调层架

- 大的侧门
- 自动减压阀
- 内置6孔插座

型号和尺寸

Part #	玻璃钢手套箱	尺寸
8307-025	2 ft. 单人型号	24" L x 24" D x 24" H
8307-030	3 ft. 单人型号	36" L x 24" D x 24" H
8307-040	4 ft. 单人型号	48" L x 24" D x 24" H
8307-050	5 ft. 双人型号	60" L x 24" D x 24" H
	铝手套箱	
8307-060	单人铝手套箱	42" L x 24" D x 36" H
8307-070	双人铝手套箱	72" L x 24" D x 36" H

特点

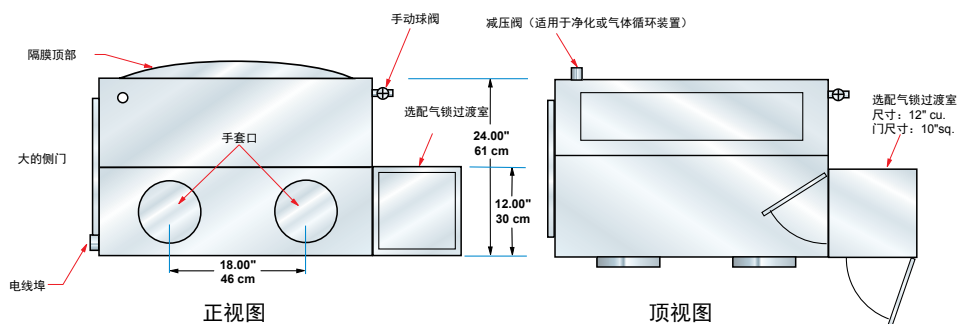



灵活的乙 烯膜通用 型手套袋



气锁过渡室

COY所有的手套箱和手套袋可与玻璃钢气锁室连接。可选自动或手动净化气锁或简单的转移舱。过渡室可在样品放入或移出手套箱时最大程度地减小箱内的气体损失。硅胶垫圈和溶剂焊接可保证其寿命及气密性。

标准尺寸
12" x 12" x 12"
门尺寸 10" x 10"
可定制不同尺寸

型号	描述
8150-110/220	自动净化气锁
8400-025	手动净化气锁
8400-026	转移气锁

标配

- 橡胶手套
- 铝支撑架和垫木底座
- 12" x 12" 玻璃钢侧门
- 手动球阀及自动降压阀

手套袋标准尺寸：


型号	描述
7602-110/220	Mini手套袋
7601-110/220	单人手套袋
7600-110/220	双人手套袋

尺寸可定制


- 2个实用橡皮塞
- 内置电源（6孔插座）
- 25"大型仪器入口



特点

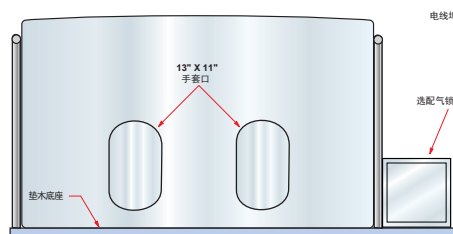

正视图

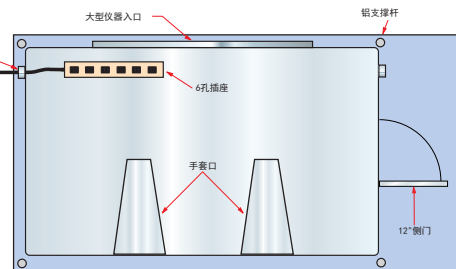

顶视图



天美 (中国) 科学仪器有限公司 TECHCOMP (CHINA) LTD.

天美科技有限公司
香港九龍彌敦道552-556号美达中心6楼
Tel: 852-27519488
Fax: 00852-27519477
E-mail: techcomp@techcomp.hk

沈阳分公司
沈阳市铁西区北二中路9号天文大厦1502室 (110025)
Tel: 024-22813328
Fax: 024-22813378
E-mail: shenyang@techcomp.cn

济南分公司
济南市历城区二环东路3218号发展大厦A座503室 (250100)
Tel: 0531-88163911/12
Fax: 0531-88163913
E-mail: jinan@techcomp.cn

兰州分公司
兰州市城关区甘南路68号5单元805室 (730000)
Tel: 0931-8724022/ 8724522
Fax: 0931-8721686
E-mail: lanzhou@techcomp.cn

天美 (中国) 科学仪器有限公司
北京市朝阳区关东园7号楼100107
Tel: 010-64010951
Fax: 010-64060202
E-mail: techcomp@techcomp.cn

成都分公司
成都市科华北路64号城南俊园15F (610041)
Tel: 028-85258161
Fax: 028-85253027
E-mail: chengdu@techcomp.cn

天津分公司
天津市和平区卫津路156号博联大厦1008室 (300070)
Tel: 022-23352643
Fax: 022-23352046
E-mail: tianjin@techcomp.cn

深圳分公司
深圳市南山区中一路6007号安泰大厦1712室 (518043)
Tel: 0755-83667531/ 83660252
Fax: 0755-83660232
E-mail: shenzhen@techcomp.cn

上海分公司
上海市浦东新区100号华林大厦2层 (200235)
Tel: 021-64870138
Fax: 021-64870142
E-mail: shanghai@techcomp.cn

西安分公司
西安市莲湖区东大街6号新航大厦2007室 (710054)
Tel: 029-82582528
Fax: 029-82582053
E-mail: xian@techcomp.cn

福州分公司
福州市鼓楼区东方大酒店13层C2座 (350001)
Tel: 0591-87673616
Fax: 0591-87673973
E-mail: fuzhou@techcomp.cn

昆明分公司
昆明市盘龙区北京路985号时光俊园2幢1单元1405室 (650024)
Tel: 0871-6627504
Fax: 0871-6625554
E-mail: kunming@techcomp.cn

广州分公司
广州市海珠区西涌100号高基大厦18D (510620)
Tel: 020-38899384
Fax: 020-38899584
E-mail: guangzhou@techcomp.cn

武汉分公司
武汉市武昌区中北路233号世纪大厦606-607室 (430062)
Tel: 027-67259095
Fax: 027-67259179
E-mail: wuhan@techcomp.cn

重庆分公司
重庆市九龙坡区科园一路2号大西国际大厦1006室 (400039)
Tel: 023-68794886
Fax: 023-68794886
E-mail: chongqing@techcomp.cn

天美 (澳门) 商业服务有限公司
澳门新口岸北湾街202A-246号澳门金融中心10楼A室
Tel: 853-28705075
Fax: 853-28705072
E-mail: macau@techcomp.hk

www.techcomp.com.hk
www.techcomp.cn

800-810-7890



天美 (中国) 官方网站