

Venusil MP C18发酵液中有机酸的含量

色谱柱: Venusil MP C18 ($4.6 \times 250\text{mm}$, $5\ \mu\text{m}$ 100\AA)


订货号: VA952505-0

流动相: $0.1\text{mol/L KH}_2\text{PO}_4$ (用 H_3PO_4 调 $\text{pH}=2.6 \pm 0.05$)

波 长: 215nm

流 速: 1mL/min

柱 温: 25°C

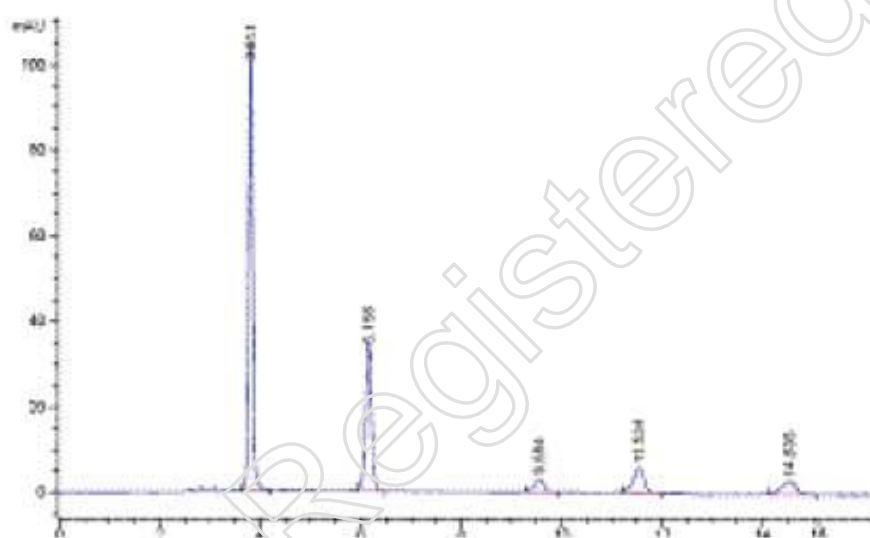

出峰顺序依次为甲酸、乙酸、顺丁烯二酸、
丁二酸、反丁烯二酸